

LCNK

New Advanced Aesthetic

LASER EXPERT LCNK

L'avenir de l'esthétique commence ici

Double pulse laser épilatoire

Formation Sur-Mesure

SAV professionnel

Garantie de 2 ans



WWW.LAMAISONLCNK.COM

Principe de fonctionnement

Découvrez l'avenir de l'épilation avec notre dernière machine d'épilation définitive au laser diode !

En tant que leader dans la fourniture de technologies esthétiques avancées, nous sommes ravis de vous présenter notre machine haute performance dédiée à l'épilation définitive. Conçue pour répondre aux besoins des professionnels de l'esthétique, elle offre une solution efficace, rapide et sûre pour un traitement sans compromis.

Principe de fonctionnement d laser à diode pour l'épilation définitive repose sur le concept de la photothermolyse sélectrice. Voici une explication détaillée :

1. Emission de la lumière laser :



Le laser à diode émet une lumière monochromatique (d'une seule longueur d'onde) spécifiquement choisie pour cibler la mélanine, le pigment qui donne sa couleur aux poils.

2. Absorption par la mélanine :

La mélanine dans les poils absorbe la lumière du laser. Cette absorption est maximale pour certaines longueurs d'onde, ce qui vous permet de cibler les poils de manière sélective.

3. Conversion en chaleur :


L'énergie lumineuse absorbée par la mélanine est convertie en chaleur. Cette chaleur est suffisante pour détruire les cellules du follicule pileux responsable de la croissance des poils, mais pas assez pour endommager la peau environnante.

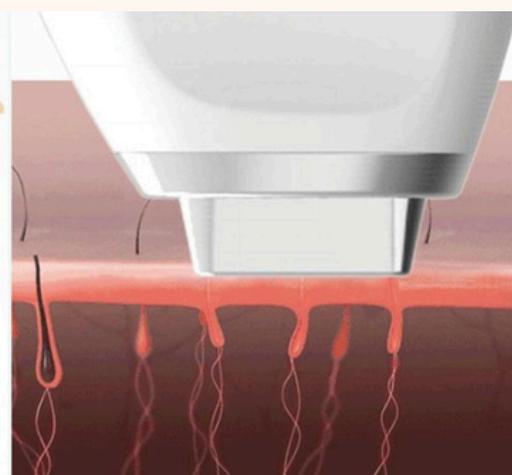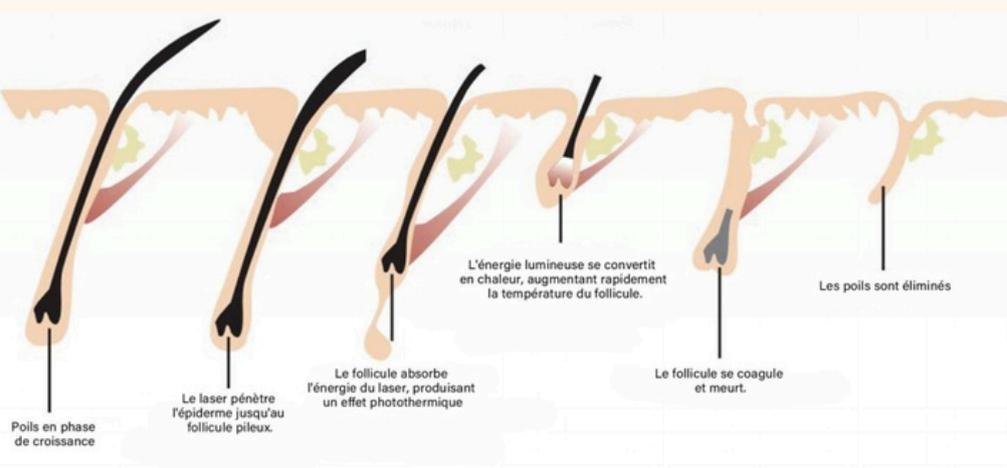

Caractéristique du traitement


1. Pour tout type de peaux

Le laser est équipé de 3 longueurs d'onde : Alexandrite 755nm, Diode 808nm, Ndyag 1064nm, ce qui permet de traiter tous type de peaux.

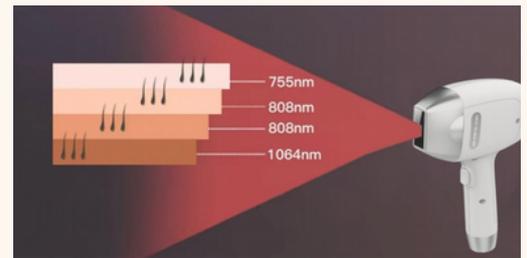

2) Pour toutes les zones :

La pièce à main est équipée de cinq embouts de différentes tailles pour traiter toutes les zones.

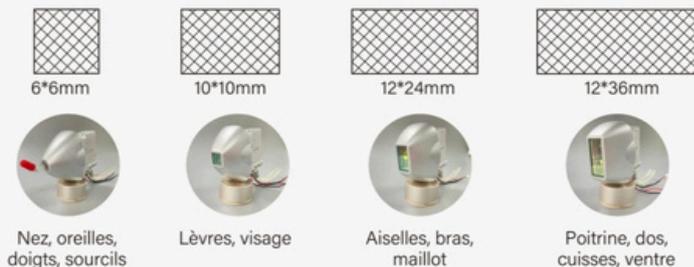

Mini-embout

Le tout petit embout permet de traitement les zones inaccessibles par d'autres embouts traditionnels comme les doigts, les oreilles, la glabelle, les sourcils etc.



Voici les zones pouvant être traitées :



3. Indolore

L'efficacité du système "Ice Cooling" réduit au maximum l'inconfort du traitement.



Grande puissance à 1800W (puissance de sortie)

Durée d'impulsion assez courte : 10-100ms

Plus confortable et convient aux peaux foncées et aux clients sensibles.



Refroidissement à la saphir pour protéger l'épiderme.



La température de l'embout peut descendre jusqu'à -17°C



Plaquette de refroidissement EU

Les détecteurs sont installés dans la pièce à main pour veiller en temps réel sur la température de l'embout afin d'éviter les brûlures.

4. Efficacité

1. Puissant

15 barres de 120W sont installées dans la pièce à main avec une puissance de sortie totale de 1800W, obtenant une intensité d'énergie plus importante et pouvant détruire efficacement les follicules pileux, ainsi le traitement est plus rapide.



2. Système FAC

L'application du système FAC permet de réduire efficacement l'angle de divergence de la sortie du laser, rendant la lumière émise plus uniforme et l'énergie plus concentrée.

3. Barres de laser fiables

Nous avons les meilleures cibles laser d'Allemagne, avec un rendement énergétique élevé et stable, et une marge d'erreur de sortie d'énergie de seulement 3%, garantissant ainsi une énergie suffisante pour pénétrer la peau et atteindre les follicules pileux.



L'augmentation significative de la puissance, l'application du système FAC et la configuration en double rangée des barres permettent à l'énergie laser de sortie d'être plus concentrée, plus uniforme et de pénétrer plus profondément, ce qui rend le traitement plus efficace.

4. Double impulsions-mode unique

Sur la base du mode traditionnel à impulsion unique, nous avons ajouté le mode double impulsion en stamping et le mode SHR double impulsion, qui constituent une innovation unique de notre appareil, offrant ainsi davantage de possibilité de traitements personnalisés pour les praticiens.

> C'est quoi le double impulsion ?

Plutôt que d'envoyer une seule impulsion de haute énergie, le laser envoie deux impulsions de plus faible intensité avec un très court intervalle entre elles. La première impulsion préchauffe le follicule pileux, et la deuxième pulse renforce cet échauffement pour détruire efficacement le follicule tout en réduisant le stress sur la peau environnante.

> Quels sont les avantages ?

Meilleure absorption de l'énergie : Le follicule pileux est plus réceptif à la deuxième impulsion, ce qui maximise l'efficacité du traitement tout en minimisant les risques de brûlure ou de dommages cutanés.



Confort accru pour les clients : Le double pulse répartit la chaleur de manière plus contrôlée, ce qui réduit la sensation de douleur pendant le traitement.

Traitement plus sûr pour les peaux foncées : En envoyant des impulsions moins intenses, le double pulse permet un traitement plus sûr sur des types de peaux plus foncées, qui sont plus sujettes aux brûlures avec les lasers traditionnels.

Efficacité accrue sur les poils épais et profonds : Le double pulse cible plus efficacement les poils plus résistants ou situés plus profondément dans la peau.

- **CLASSIC :** Le mode impulsion classique délivre une impulsion laser intense, ainsi l'énergie est concentrée, ce qui permet de traiter les follicules pileux peu profonds ou les poils fins tels que la lèvre supérieure, le menton, le visage, ...
- **SLIDE DOUBLE SHOT/STEMP DOUBLE SHOT :** Ce mode est idéal pour traiter les poils plus épais et les follicules profonds, améliorant ainsi l'efficacité de l'épilation tout en réduisant l'irritation de la peau, offrant ainsi un plus grand confort, par exemple les jambes, le dos, le torse et la ligne du bikini.

AVANTAGES DE NOTRE MACHINE

1 L'écran



Ecran ultra haute définition 4K de 15,5 pouces réactif et offrant une excellente expérience utilisateur.

2 Système ultra-intelligent

Système de changement d'eau automatique



L'état de l'appareil est clair et facile à voir d'un coup d'oeil.



Détection automatique de l'embout et suggestion des paramètres correspondants

Trois modes : Mode SHR classique, Mode Double Pulse, Mode SHR Double Pulse

Rappel de maintenance quotidienne

Système de diagnostic intelligent qui permet de résoudre facilement divers problèmes après-vente.

Recommandation de paramètres efficaces validés par des essais cliniques.

3 Pièce à main

La poignée est conçue de manière ergonomique, offrant une prise en main confortable.

4 embout magnétiques de tailles différentes, facile à démonter et à nettoyer.



Photos de l'appareil



AVANT/APRES



Spécificités techniques

Désignation	Diode Laser Epilation 1800W YW-N3
Puissance d'entrée	3600W
Puissance de sortie	1800W
Barres de laser	15*120W
Embouts	12*36mm ² 12*24mm ² 10*10mm ² Mini-embout
Densité d'énergie	80J/cm ² 95J/cm ² 100J/cm ² 80J/cm ²
Durée d'impulsion	10-100ms
Fréquence	0.5-10Hz
Mode d'aspiration	SHR Classique/Double Pulse/SHR Double Pulse
Système de refroidissement de la pièce à main	TEC à semi-conducteur
Système de refroidissement de la machine	Système à air, à eau et à semi-conducteur
Tension d'entrée	110VAC/220VAC, 50Hz-60Hz, 3600W
Dimension et poids	64cm x 64cm x 153cm, 90kg

Rentabilité LASER EXPERT

	Nb de séance/ semaine	Prix moyen par séance	CA mensuel	Machine PAYEE
Faible	10	100€	4 000€	5 mois
Moyenne	20	100€	8 000€	2.5 mois
Forte	30	100€	12 000€	1.5 mois
Intense	50	100€	20 000€	1 mois

Tarif conseillé pour une séance : entre 90€ et 450€ selon la zone.

Nombre de séances pour un résultat optimal : 8 à 10 séances



Le mot de Céline

Transformez votre vie grâce au, pour moi, traitement le plus rentable, le plus fiable et le plus rapide que nous pouvons avoir dans nos business. c'est LA VALEURE SÛRE !

- + Elargissez votre offre de services en ajoutant un soin extrêmement rentable et efficace à votre carte !
- + Répondez à la demande croissante de l'épilation définitive.
- + Fidélisez vos clients en leur offrant un traitement exceptionnel avec des résultats visibles dès la 1ère séance.
- + Offrez à vos clients des solutions sûres et ultra efficaces.

FORMEZ-VOUS AUPRES DE NOS EXPERTS POUR DES RESULTATS INEGALES

En tant que leader dans la pratique de l'épilation définitive, la Maison de Beauté LCNK vous fournis des appareils de qualité supérieure mais souhaite également se placer en véritable leader en formation LASER avec un accompagnement Sur-Mesure véritable symbole de qualité LCNK alliant théorie approfondie, pratique en conditions réelles, coaching développement business, outil marketing OFFERT et suivis d'1 an.

Pour que vous exploitiez pleinement la technologie LASER LCNK et de garantir à vos clients des résultats visibles et durable, en renforçant l'expertise et la rentabilité de votre business.



A l'achat du **LASER EXPERT LCNK**, bénéficiez d'une formation complète OFFERTE, d'une valeur de **900€ +** notre accompagnement business, d'une valeur de **3000€ +** des outils marketing prêts pour booster votre business d'une valeur de **1000€**.

LCNK
New Advanced Aesthetic

Pour nous contacter

www.lamaisonlcnk.com

087/70 98 84 | 0497/02 82 43

info@lamaisonlcnk.com

Rue Deru Dehayes 29, 4802 HEUSY | BELGIQUE